



FiSiOMAG[®]

SUA VIDA, muito mais SAUDÁVEL!



MANUAL DO USUÁRIO

BENEFÍCIOS

- Ativação da circulação sanguínea, acelerando o processo de oxigenação, renovação celular e redução das toxinas;
- Alívio da rigidez muscular, proporcionando relaxamento, fator essencial para aliviar dores e processos inflamatórios;
- Relaxamento muscular e alívio de câibras;
- Melhoria do retorno venoso, prevenindo varizes e edemas de membros inferiores;
- Melhoria do sistema imunológico, aumentando a resistência do organismo;
- Alivia dores de entorses, contusões, dores traumáticas, luxações, problemas musculares e reumáticos;
- Alívio de dores da região lombar, torcicolos e outros distúrbios na coluna vertebral;
- Alívio de dores musculares nas pernas, panturrilhas e nervo ciático;
- Redução de dores de cabeça (enxaqueca);
- Redução do estresse, da insônia e do cansaço físico e mental;
- Melhoria na remoção do ácido láctico após exercício físico;
- Prevenção de lesão por esforço repetitivo (LER), tendinites e bursites;
- Alívio de cólicas menstruais.

INDICAÇÕES

- Esportistas, Academias e Clubes Esportivos.
- Profissionais que exercem atividades físicas pesadas.
- Pessoas que não exercem atividades físicas.
- Pessoas que ficam horas sentadas e ao volante.
- Pessoas que ficam horas em pé.
- Pessoas que ficam horas em frente ao computador.
- Pessoas com tendência a adquirir a LER (Lesão por Esforço Repetitivo).
- Pessoas com problemas circulatórios.
- Escritórios, Consultórios e Indústrias.
- Feiras e Eventos.
- Clínicas de Fisioterapia e Fisioterapia do Trabalho.
- Hospitais e Centros de Reabilitação.
- Spas e Clínicas de Repouso.
- Hotéis, Pousadas e Aeroportos.
- Melhor Idade e Home-Care.
- Entre outros.

ATENÇÃO

- Alívio Imediato de Dores Musculares e Cansaço Físico
- A N.K.ORIENTAL COMÉRCIO DE PRODUTOS TERAPÊUTICOS LTDA não se responsabiliza pelo uso incorreto do aparelho
- Sentar no aparelho pode danificar seu funcionamento e ocasionar a perda de garantia.

CONTRA-INDICAÇÕES:

- PORTADORES DE MARCAPASSO
- PACIENTES EM HEMODIÁLISE
- GESTANTES
- PACIENTES COM TROMBOSE VENOSA PROFUNDA
- CRIANÇAS SOMENTE COM ACOMPANHAMENTO DE UM RESPONSÁVEL.

A MEDICINA DO FUTURO



Porque a saúde não é permanente?

A saúde do nosso corpo depende do equilíbrio do metabolismo celular. Este equilíbrio provém de uma série de fatores essenciais como a alimentação, a temperatura, os aspectos emocionais e a radiação energética.

Essas radiações energéticas são como raios laser de baixa frequência, que aumentam as energias celulares, estimulando positivamente todo metabolismo do corpo humano. Sem esta energia, as frequências das células entram em desequilíbrio, e o corpo fica à mercê dos efeitos prejudiciais das bactérias, fungos e vírus.

O que são Raios de MAG-INRED?

Os raios são resultados de uma altíssima tecnologia, consistente na mistura de alumínio, platina e titânio, emitindo raios de MAG-INRED numa frequência de 4 a 14 microns. Esta transmissão de energia produz efeitos biológicos.

Uma pessoa submetida aos campos de energia emanados pelo **FISIOMAG** aumenta sensivelmente o seu bem estar, pois em contato com a pele eles permitem um aquecimento, emitindo raios através do MAG-INRED, resultando numa faixa de frequência média bem harmônica, equilibrando o metabolismo das células.

É uma energia que não se vê e nem se sente, mas ela está presente no **FISIOMAG** assim como também não vemos e não sentimos algumas faixas de raio de baixa frequência emitidas pelo sol, que são responsáveis pela manutenção dos seres vivos.

As ondas eletromagnéticas de 4 a 14 microns emitidas pelo MAG-INRED são idênticas aos raios emitidos pelo sol (raios vitais) das 8 às 10 da manhã e são fundamentais e benéficos para a manutenção da saúde e o crescimento das células.

Por fim, considerando que cerca de 70% do corpo humano é constituído de água, quando não existe a presença suficiente dos raios encontrados no sol e no MAG-INRED, forma-se no organismo grandes grupos de moléculas de água (clusters) e isso é desfavorável às células, pois permite que uma série de toxinas se acumule em seu interior. No entanto quando os raios de sol, presentes no MAG-INRED, incidem sobre os clusters, estes se desfazem em grupos mínimos e isso permite às células, assimilarem todas as substâncias necessárias, eliminando as toxinas do organismo.

Magnetoterapia

Pesquisas realizadas confirmaram que a utilização da magnetoterapia ativa e equilibra a energia do nosso corpo físico, melhorando o sistema imunológico do organismo contra as doenças.

- ❖ Melhora a capacidade de oxigenação e qualidade do sangue;
- ❖ Proporciona um melhor vigor físico e mental, aliviando o stress;
- ❖ Ajuda no alívio de dores na coluna vertebral;
- ❖ Eficiente no tratamento de dores musculares;
- ❖ Eficiente terapia magnética para obter uma melhor qualidade de sono.

QUEM TEM BOA CIRCULAÇÃO, TEM SAÚDE E VIVE MELHOR.

Belo Horizonte, 19 de agosto de 2002.

MEU PARECER EM RELAÇÃO AO **FISIOMAG**


Eu, **Joaquim Ricardo Cangue**, médico clínico, residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG tive um excelente resultado na minha recuperação em relação à lebite e à Tromboflebite e Erisipela que me acometeu este ano no mês de abril. Após um período de oito dias de internação passei a usar o **FISIOMAG** diariamente. Minha perna e pé, que viviam edemaciados, em apenas uma semana de uso, o edema desapareceu e passei desde então a jogar futebol de salão. Não uso mais anticoagulantes orais e me considero clinicamente curado.

Meu pai, sequelado de AVC, três episódios que o deixaram prostrado no leito, com um mês de uso de **FISIOMAG**, desce as escadas sozinho do 2º andar, caminha hoje oito quarteirões por dia apoiado com bengalinha de mão.

Como cortesia, todos meus clientes na clínica usam **FISIOMAG** (posições 1, 2 e 3) e já tive várias manifestações de clientes de dor nas pernas aliviada.

Como médico, aconselho o uso do **FISIOMAG** para todas as pessoas independentemente do que sentem, para a prevenção das inúmeras enfermidades.

Atenciosamente,

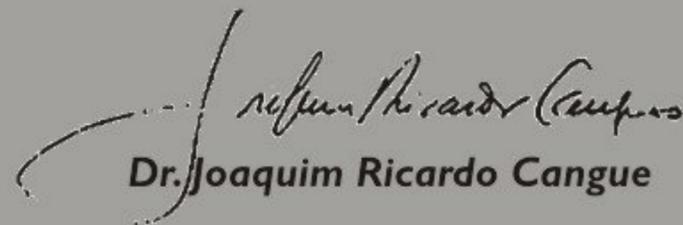

Dr. Joaquim Ricardo Cangue

VOCÊ SABE O QUE É TVP? TROMBOSE VENOSA PROFUNDA

Mais que uma simples sigla, a TVP é uma inimiga silenciosa que já representa milhares de internações e mortes em todo mundo.

TVP significa Trombose Venosa Profunda, uma doença que só nos Estados Unidos é responsável por mais de 300 mil internações ao ano, causando entre 100 e 200 mil mortes, superando até mesmo o número de mortes causadas por Acidente de Trânsito.

A TVP pode ocorrer em pessoas saudáveis como você, em virtude de alguma cirurgia mais prolongada, uma hospitalização ou imobilização por um longo período devido a uma doença cardíaca, pulmonar ou infecciosa.

Embora grave, ela pode ser evitada facilmente, e hoje já é possível avaliar e saber se você é uma das pessoas que apresentam risco de desenvolvê-la, caso necessário, faça a prevenção.

Ela é simples, assim como a sua avaliação.

Isso pode salvar a sua vida.

Iniciativa:

Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vasculiar

É EXPRESSAMENTE CONTRA-INDICADO O USO DO FISIOMAG EM INDIVÍDUOS COM TROMBOSE.

QUEM TEM BOA CIRCULAÇÃO, TEM SAÚDE E VIVE MELHOR.

Posições de Uso

1



Tempo Recomendado
02
minutos

Posição de uso para oxigenação do organismo, drenagens linfáticas, aliviando o cansaço físico, mental e estresse.

2



Tempo Recomendado
01
minuto

Posição de uso para dores nas pernas, panturrilhas e melhoria nas articulações dos joelhos e estimulando os músculos da coxa.

5



Tempo Recomendado
30
segundos

Posição de uso para desbloqueio do sistema nervoso da região lombar e correção postural.

6



Tempo Recomendado
30
segundos

Posição de uso para desbloqueio muscular da região lombar e correção postural.

9



Tempo Recomendado
30
segundos

Posição de uso para aliviar lesão por esforço repetitivo (LER), da artrite tendinite e bursite através das movimentações das articulações dos braços, antebraços e mãos.

10



Tempo Recomendado
01
minuto

Como excelência no sistema circulatório depende, principalmente, da circulação de retorno (venosa), o exercício do vaso capilar neste aparelho é a forma mais eficaz para recuperar a circulação de retorno, não provocando nenhum esforço físico ou cardíaco, portanto, é ideal para todas as idades e para as terapias de recuperação do sistema cardíaco, vascular e cerebral.



Pratique as sessões do Fisiomag de 1 a 3 vezes ao dia. As sessões poderão ser realizadas com todas as 12 posições para benefícios sistêmicos ou utilizando-se apenas as posições alvo, de acordo com as suas necessidades.

3



Tempo Recomendado
30 segundos

Posição de uso para massagear as coxas e movimentar as articulações do joelho, alongar o nervo ciático e estimular os músculos e fêmur.

4



Tempo Recomendado
30 segundos

Posição de uso para artrite, tendinite, bursite e melhoria na circulação sanguínea.

7



Tempo Recomendado
02 minutos

Posição de uso para oxigenação do organismo, drenagens linfáticas, aliviar as pressões dos vasos sanguíneos, relaxando e aliviando o cansaço físico e mental e estresse.
Obesidade - fazer 5 minutos na mesma posição, fazer mais 5 minutos - 3 vezes ao dia

8



Tempo Recomendado
30 segundos

Posição de uso para alívio das dores no nervo ciático, cãimbra, cóccix, coluna e região abdominal, proporcionando uma agradável sensação de bem estar.

11



Tempo Recomendado
01 minuto

Posição de uso para movimentar os músculos, nervos e articulações, substituindo em minutos sem esforço físico e alteração dos batimentos cardíacos os movimentos fornecidos em uma hora de esteira ergométrica e caminhada.

12



Tempo Recomendado
30 segundos

Posição de uso para relaxar, desbloquear o tronco, melhorando o conjunto postural e peitoral.

PARA MELHOR UTILIZAÇÃO DO FISIOMAG

Em todas as posições de uso indicadas no manual, recomenda-se não tirar as mãos ou os pés do aparelho enquanto estiver em funcionamento.

Após desligar o aparelho, aguardar de 5 a 10 segundos na posição que esta fazendo, pois, receberá uma estimulação muscular e circulatória que resultará numa oxigenação e auxiliará no sistema de drenagem linfática.

Siga corretamente as posições informadas no folder, sempre lembrando que a pessoa que estiver utilizando o aparelho deve estar com a cabeça levantada a fim de não provocar “tonturas” e nem a oxigenação excessiva no cérebro.

As posições 1, 2 e 3 auxiliam no tratamento das dores musculares nas pernas se, utilizadas dentro do seu tempo recomendado.

As posições 3 e 8 podem ajudar no desempenho sexual.

A posição 7 é indicada para casos de obesidade, devendo as sessões serem feitas durante 5 minutos, descansando 5 minutos sem retirar as pernas da posição e repetindo por mais 5 minutos, 3 vezes ao dia (manhã, tarde e noite), recomenda-se tomar 2 (dois) copos de água antes de fazer essa posição.

Importante ressaltar que o uso correto do aparelho na posição 7, poderá auxiliar na perda de peso se aliado a uma alimentação saudável, segundo depoimentos de vários usuários que já obtiveram resultados positivos, auxiliando, inclusive, no tratamento de celulite e flacidez.

OBS: Em todas as posições não exceder o tempo recomendado.

QUEM TEM BOA CIRCULAÇÃO, TEM SAÚDE E VIVE MELHOR.

INFORMATIVO IMPORTANTE

AOS USUÁRIOS DO **FISIOMAG**

APARELHO ATIVADOR MUSCULAR E CIRCULATÓRIO

O **FISIOMAG** é um aparelho ativador muscular e circulatório e seu uso é considerado uma terapia alternativa, não dispensando os tratamentos e as orientações médicas.

O **FISIOMAG** atua como coadjuvante, dessa forma, o usuário pode não ter os resultados desejados se estiver com quadro crônico.

O **FISIOMAG** é um aparelho vibroterápico e tem o seu tempo de uso regulamentado pelo departamento terapêutico e médico da empresa.

O **FISIOMAG NÃO PROMETE CURA**, apenas auxilia na ativação do sistema circulatório, aliviando dores e ajudando a manter os movimentos que uma pessoa não poderia fazer ativamente, tais como caminhadas, uso de bicicletas ergométricas, esteiras e etc.

O **FISIOMAG** possibilita um exercício passivo, trazendo uma agradável sensação de bem estar, pois tendo uma boa circulação sua vida será muito mais saudável.

Conforme consta do MANUAL DO USUÁRIO que acompanha o aparelho e também está disponível no site www.fisiomag.com.br, as sessões do **FISIOMAG** deverão ser feitas de 1 a 3 vezes ao dia.

A **FISIOMAG** não se responsabiliza por quaisquer informações, passadas por seus distribuidores no momento da venda do produto, divergentes das disponíveis em seus manuais e site.

A **FISIOMAG** agradece a sua atenção e se coloca à disposição para maiores esclarecimentos.

FISIOMAG SUA VIDA MUITO MAIS SAÚDAVEL!

CURIOSIDADES SOBRE O CORAÇÃO

1) Quantas vezes o coração “bate” por dia?

Coração normal de um indivíduo funciona como uma bomba muscular fazendo com que o sangue se movimente ou circule do coração para resto do corpo levando nutrientes e oxigênio. Em média um coração trabalha ou se contrai em torno de 100.000 vezes em 24 horas.

2) Qual é a quantidade de sangue que o coração bombeia por 24 horas?

Em 24 horas o coração bombeia em média 2000 galões de sangue ou 7.200 litros de sangue por dia ou 216.000 litros no mês ou 2.592.000 (dois milhões quinhentos e noventa e dois mil litros) em um ano.

3) Você sabe quantas vezes o coração de uma pessoa de 70 anos bateu?

Em um indivíduo de 70 anos, seu coração já contraiu (bateu) uma fantástica cifra de 2,5 bilhões de vezes.

4) Qual é a extensão do sistema circulatório?

O sistema circulatório consiste de uma rede de tubos elásticos de grande extensão, composto mais precisamente pelo coração, pulmões, artérias, arteríola e capilares que são vasos sanguíneos, além das veias e vênulas. Portanto o Sistema Circulatório acima descrito, apresenta uma incrível extensão de 60.000 milhas ou 96.000 kms.


5) Qual é a função do sangue na circulação?

O sangue transporta nutrientes e oxigênio para todos os tecidos do corpo humano, incluindo o próprio coração. Ela tem a função também de extrair substâncias metabólicas (lixo) provenientes dos tecidos e levá-los para os rins, fígado, pulmões onde elas são removidas ou metabolizadas (limpas).

❖ Algumas informações referente as “CURIOSIDADES DO CORAÇÃO” foram fornecidas pelo site www.biopace.com.br

Conheça também outros produtos **FISIOMAG**

Travesseiro **FISIOMAG**

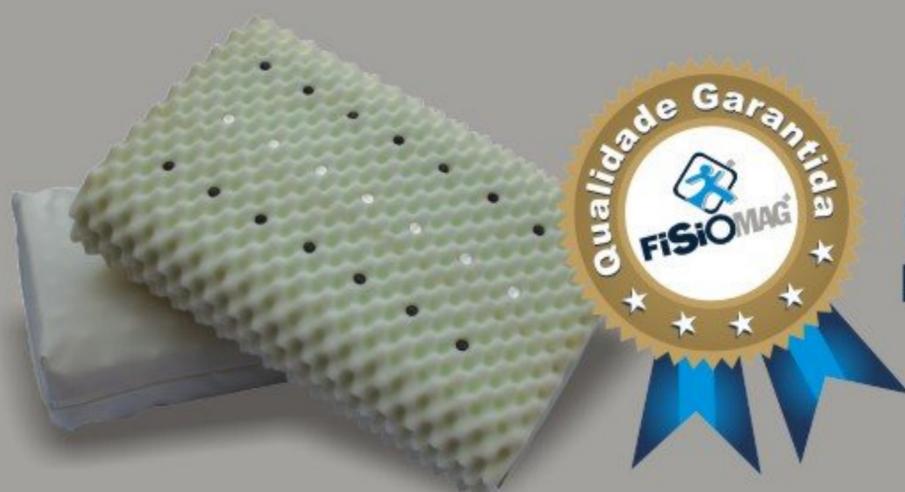

Perfilado especial com excelente ventilação e elasticidade. Proporciona uma postura ideal para dormir. Pastilhas de Platinum e magnetos, colocados de maneira ideal para promover intenso relaxamento.

Colchão **FISIOMAG**



A **FISIOMAG**, atende à necessidade de proporcionar uma melhor qualidade de vida aos seus clientes, para tanto desenvolveu nas fabricações dos colchões magnéticos e infravermelhos longo a mais alta tecnologia, utilizando-se de produtos com selos de qualidades já comprovadas no mercado. Desta forma acreditamos que conforto e segurança estão associados ao benefício de um sono reparador, ajudando a manter a saúde em equilíbrio.

Colchão Vibroterápico



VIBROTERAPIA

É um sistema moderno de massagem eletrônica, que ao ser ligado, através de um controle remoto, emite rápidas vibrações de pulsos e ondas eletromagnéticas. Essas vibrações têm frequências e intensidades diferentes, atinge os pontos que discontraí e relaxam os músculos, melhorando as tensões.



FISIOMAG[®]
SUA VIDA, muito mais SAUDÁVEL!



N.K. ORIENTAL COMÉRCIO DE PRODUTOS TERAPÊUTICOS LTDA. Indaiatuba. SP. Brasil.
CEP: 13.346-090 | Produto: Aparelho Fisiomag | A N.K. ORIENTAL COMÉRCIO DE
PRODUTOS TERAPÊUTICOS LTDA não se responsabiliza pelo uso incorreto do aparelho |
Este aparelho atua como coadjuvante e auxiliar no tratamento, não dispensando demais
tratamentos de saúde e orientações médicas | Por se tratar de terapia alternativa, este produto
pode não apresentar os efeitos desejados em pacientes com quadros crônicos | Proc. Reg.
Marca Fisiomag 822.936.607 | Patente DI 6804026-1 Proc. Reg. Marca Mag Inred
827.220.7821 Especificações Técnicas: Peso do aparelho: 10 kg | Magnetoterapia
Infravermelho longo Mag-Inred) Vibroterapia | Potência do Motor: 1/4cv (0,18kW) Pólos: IV
Carcaça em chapa: 42 (capacitor permanente) 110 / 220V ou 127V Frequência: 60Hz |
Proteção: IPOO (aberto) Classe de isolamento: "B" | Não ligue o aparelho junto a outros
equipamentos elétricos | Garantia de 01 ano | Todas as informações e recomendações
fornecidas neste impresso são de responsabilidade técnica exclusiva da NK Oriental Comércio
de Produtos Terapêuticos LTDA | Ilustrações: The Macmillan visual dictionary / Jean-Claude
Colbeil, Ariane Archambault. 1992. 120,121. Éditions Québec / America Inc. | As fotos indicam
sugestões e recomendações de uso | Cadeiras e demais acessórios não inclusos | Para mais
informações consulte nosso Terapeuta Responsável: www.fisiomag.com.br ou envie um email
para fisiomag@fisiomag.com.br |

Representante: